



CARDIOVIT AT-102

ECG multifuncional de alto rendimiento que satisface los requisitos más exigentes y ofrece una excelente relación calidad-precio.

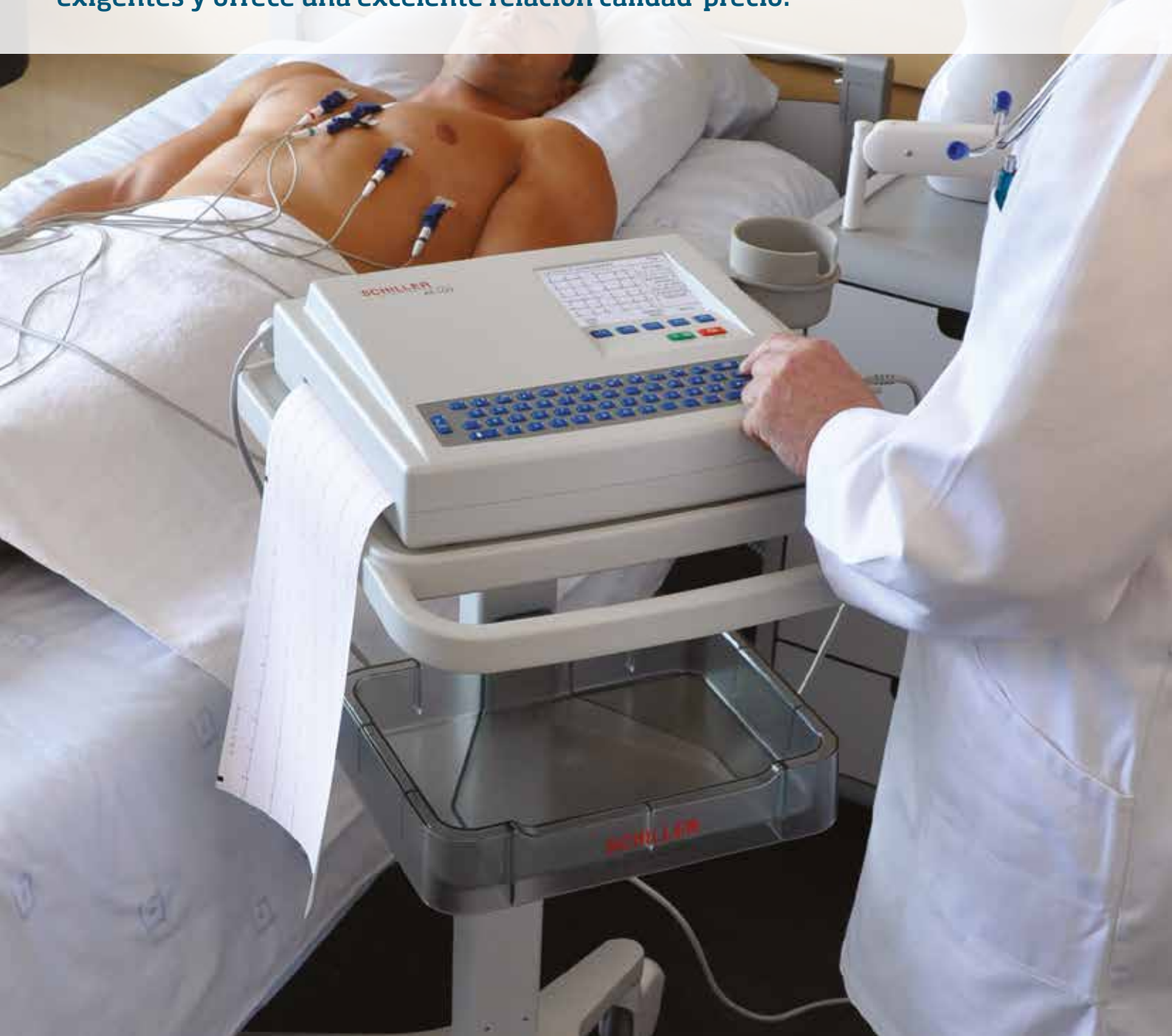

CARDIOVIT AT-102

El CARDIOVIT AT-102 es un magnífico asistente de ECG de 12 canales multifuncional, para el registro y análisis inmediato de ECG reposo y ECG esfuerzo. El sencillo interfaz de usuario y su funcionamiento intuitivo proporcionan alta productividad y eficiencia, ofreciendo al mismo tiempo una excelente relación calidad-precio.

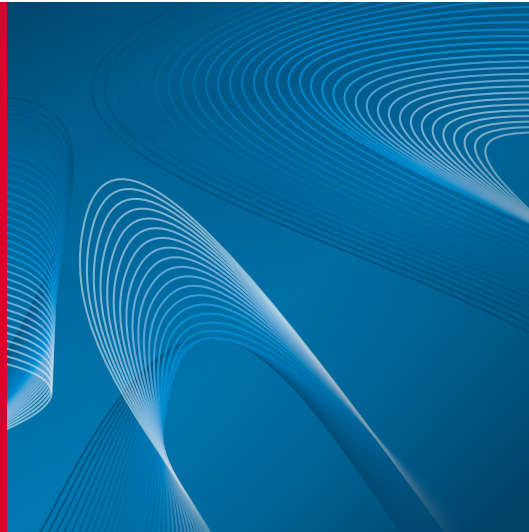

SOLUCIÓN PERFECTA EN ECG DE 12 CANALES

El CARDIOVIT AT-102 es un sistema de ECG reposo ampliable particularmente adecuado para su uso rutinario en la consulta, en la clínica o en medicina de urgencias, gracias a su funcionamiento sencillo e intuitivo con teclas de función directa. Mediante el software opcional, el sistema puede ampliarse de forma muy sencilla en una estación de medición de ergometría. Asimismo, el CARDIOVIT AT-102 puede integrarse en un sistema informático de hospital (HIS), desde el que pueden descargarse listas de trabajo para registros ECG planificados al CARDIOVIT AT-102. El funcionamiento en unidades móviles está garantizado en cualquier momento y cualquier lugar gracias a su batería integrada.

La impresora en tiempo real integrada A4 de alta resolución garantiza el almacenamiento a largo plazo de registros de ECG en calidad de archivo; gracias al alimentador automático de papel, imprimir nunca ha sido más sencillo. El engorro del papel térmico pasó a la historia.

En la pantalla gráfica de alto brillo del CARDIOVIT AT-102 pueden mostrarse las 12 derivaciones de ECG en secuencias de 3, 6 o 12, seleccionables a voluntad. Asimismo, puede conectarse al CARDIOVIT AT-102 una pantalla LCD externa (opcional).

El software de medición e interpretación de SCHILLER es el preferido para hospitales, consultas, clínicas e institutos de investigación médica, debido a su excelente calidad y fiabilidad.

• Software de medición e interpretación SCHILLER para niños y adultos:

Análisis de ECG de 12 derivaciones, que ofrece calidad y fiabilidad sin compromisos - su herramienta más valiosa para obtener una segunda opinión clínicamente fiable.

• Software de trombolisis SCHILLER (SCHILLER STP):

Ayuda a los médicos a adoptar decisiones en atención pre-clínica y en urgencias. El programa tiene en cuenta la medicación, la edad, el sexo y el ECG de un paciente, y proporciona indicaciones acerca de la probabilidad de isquemia cardíaca aguda o de síndrome coronario agudo (ACS). El paquete de software SCHILLER STP es una opción adicional al software de interpretación mediante ordenador.

Con el CARDIOVIT AT-102 pueden controlarse todas las funciones de ergometría, incluyendo ergómetros de bicicleta con o sin registro de presión arterial, y cintas de correr. Se incorporan los protocolos de esfuerzo estándar y pueden modificarse o alterarse individualmente en caso necesario.

• ECG esfuerzo SCHILLER:

- Medición ST de 12 canales
- Posibilidad de configurar impresiones por etapa o finales.
- Ergometría completamente automática - puede intervenir en cualquier momento



CONECTIVIDAD

El Módulo de Comunicación SCHILLER (SCM) opcional conecta el AT-102 con el Sistema de Gestión de Datos SEMA de SCHILLER, lo que proporciona un flujo de trabajo optimizado y mayor funcionalidad. El módulo permite la comunicación bidireccional no sólo con el SEMA, sino también con Sistemas Informáticos de Hospital (HIS) y Sistemas de Registros Médicos Electrónicos (EMR), mediante LAN.

Los datos demográficos de los pacientes se recuperan de forma cómoda y rápida, minimizando de ese modo la probabilidad de errores en la introducción de datos. Asimismo, el lector de códigos de barras opcional incrementa la eficiencia mediante la introducción automatizada de los identificadores de paciente.

La función de lista de trabajo permite descargar directamente al equipo una lista de solicitudes, junto con los datos demográficos de los pacientes. Ello automatiza el proceso de adquisición de ECG y proporciona un flujo de trabajo en bucle cerrado con trazabilidad, desde la introducción de la solicitud hasta la facturación.

La transmisión de registros al sistema de gestión de datos SEMA permite el archivo de sus datos durante un tiempo prolongado, y cuenta con herramientas de búsqueda y edición sencillas de utilizar para gestionar los pacientes y los registros de modo más eficiente. Asimismo, las interfaces estándar mediante HL7, GDT y XML hacen que el sistema SEMA pueda integrarse como componente de una solución de sistemas más amplia, evitando silos de información aislados.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerz.hr
www.schiller.ch



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
adv@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E5-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bells Hill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

